

FFP2 Atemschutzmaske

Filtrierende Halbmaske (FFP)

zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

Erfüllt DIN EN 149:2001+ A1:2009

EN 14683:2019 Norm



Europäische Produktion


10 Stück pro Karton / einzeln im PE Beutel verpackt

Komfort, Sicherheit und Praxistauglichkeit stehen bei dieser Atemschutzmaske im Vordergrund. Die filtrierende Halbmaske der Klasse FFP2 bietet zuverlässigen Schutz vor gesundheitsschädlichen, mindergiftigen Stoffen und Schutz vor lungengängigem Feinstaub in der Atemluft.

Elastische Schlaufen sorgen für schnelles, einfaches Anlegen und Abnehmen. Ein stabiler Nasenbügel schließt im Nasenbereich ab. Hohe Filterleistung und geringer Atemwiderstand garantieren höchste Sicherheit bei größtem Tragekomfort.

Atemschutzgerät der Kategorie FFP2 zum Schutz des Benutzers durch Filtern der eingeatmeten Luft und zur Verringerung des Risikos von Infektion zwischen Menschen. Die Filtrationseffizienz liegt über 95%.

Es handelt sich um ein Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42 / EWG und auch um persönliche Schutzausrüstung in gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Das mit CE gekennzeichnete Produkt garantiert die Einhaltung der Anforderungen der geltenden Gesetzgebung.

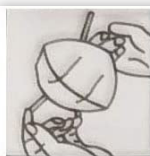

1.
Hände waschen &
Maske aufklappen.



2.
Maske mit den
elastischen Bändern
hinter das Ohr
hängen.



3.
Mit Zeigefingern
den Nasenbügel an
die Kontur der Nase
anpassen.



4.
Die Maske
abdichten:
Nase, Mund und
Kinn müssen
bedeckt sein.

Quality

Nur zum einmaligen Gebrauch
Gemütlich
Farbe: weiß
Material: Baumwolle + Vlies
Schutzklasse: FFP2 Premium
Klassifizierungsrate: $\geq 95\%$
Größe: universell

FFP2 Atemschutzmaske

Art. No.	40304
einzeln im PE Beutel 10 Stück im Karton	

Beschreibung und Bild des PPE-Produkts:



Atenschutzgerät FFP2 Premium NR bietet den Schutz des Atmungssystems eines Benutzers vor festen und flüssigen Aerosolen in der Luft gemäß den Angaben des Herstellers.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Klasse FFP2.

Das Produkt ist in die Kategorie III eingestuft und darf nur in Verbindung mit dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul C2 im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 verwendet werden.



Grafisches Erscheinungsbild der CE-Kennzeichnung. Im Falle der Einbeziehung einer benannten Stelle in die Phase der Herstellungsprüfung (Kategorie III, Modul C2 oder D) wird ihre Unterscheidungsnummer dem CE-Zeichen hinzugefügt.