

Schnell & Einfach! Testen leicht gemacht.  
Für den vorderen Nasenbereich!



Erkennt auch die neuen Virusstämme VUI -  
202012/01 (UK Mutation) und Süd Afrika.

Nur zum **Selbsttest** und zur  
In-vitro-Diagnostika.

Bei der Bundesregierung Deutschland gelistetes Produkt.  
Antigen-Test zum direkten Erregernachweis des  
Coronavirus SARS-COV-2 NR. 5640-S-168/21.

Mit dem CLUNGENE Antigen Schnelltest  
ist kein tiefes Eindringen in den Nasen-  
oder Rachenraum mehr notwendig.  
**Etwa 2-2,5cm im vorderen Nasenbereich.**

Probengewinnung:  
Nasaler Abstrich (vorderen Nasenbereich)

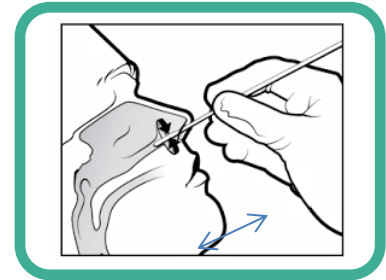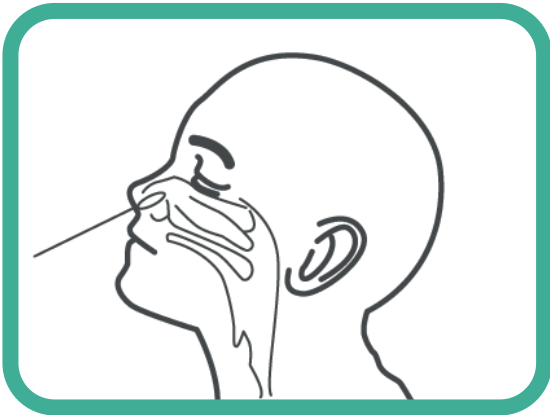

etwa 2-2,5 cm

Mit dem CLUNGENE-SARS COV 2 Antigen Schnelltest ist kein tiefes Eindringen in den Nasen- oder Rachenraum mehr notwendig. Weniger invasive Probenentnahme – etwa 2-2,5 cm erforderlicher Nasenabstrich. Als Probematerial dient ein besonders schonender nasaler Abstrich. Die verlässliche Alternative mit einfacher Handhabung. Der Abstrich wird aus der vorderen Nase mittels Drehbewegungen ohne unangenehme Reaktionen durchgeführt.


Wiederholen Sie bitte den Vorgang mit demselben Tupfer für das andere Nasenloch, und stellen Sie sicher, dass genügend Proben aus beiden Nasenhöhlen entnommen werden.

Einfache Handhabung,  
keine zusätzlichen Materialien notwendig.  
Testergebnisse bereits nach 15 Minuten.



Für den vorderen Nasenbereich!  
Sonderzulassung  
BfArM Nr. 5640-S-168/21



Testkit-Ausstattung	
5 Stück	Testkassette verpackt in Folienbeutel mit Trockenmittel
5 Stück	Ampullenflasche mit 0,3 ml Extraktionsreagenz
5 Stück	Einweg-Tupfer zur Probenentnahme
5 Stück	Röhrchen
1 Exemplar	Packungsbeilage

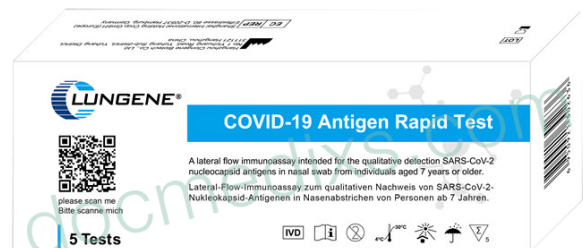

Für die ordnungsgemäße Anwendung kann keine Haftung übernommen werden. Schnelltests sind von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.

## Für den Abstrich im vorderen Nasenbereich!





### Probengewinnung: Nasaler Abstrich (vorderen Nasenbereich)

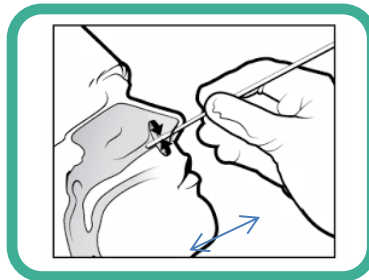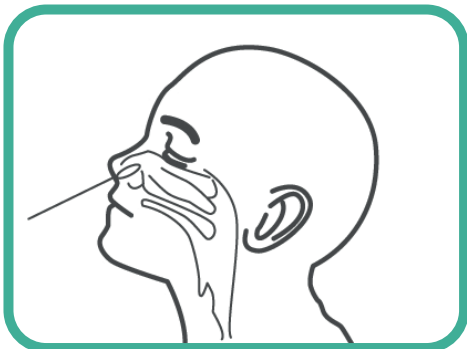



Wiederholen Sie bitte den Vorgang mit demselben Tupfer für das andere Nasenloch, und stellen Sie sicher, dass genügend Proben aus beiden Nasenhöhlen entnommen werden.

Führen Sie den Tupfer **etwa 2-2,5 cm tief in die Nase** ein, unter leichten Drehbewegungen des Tupfers streichen Sie an der Innenfläche der Nase mindestens 5 Sekunden entlang.

### Probenvorbereitung:

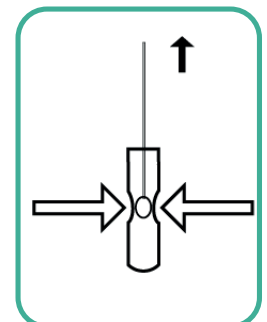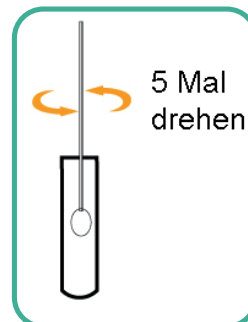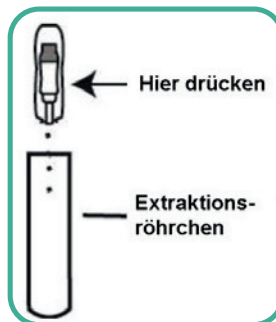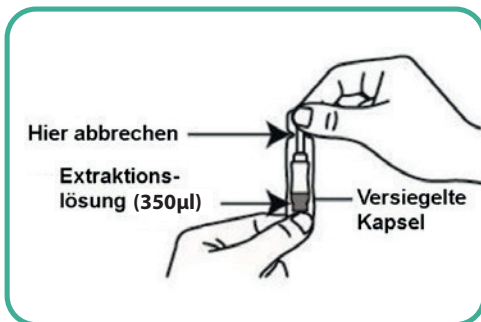

### Nachweis:

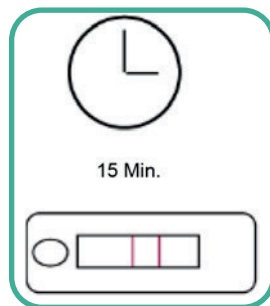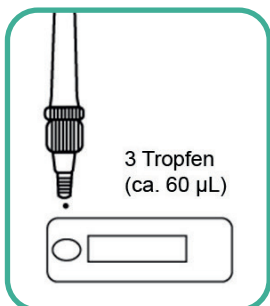

Lesen Sie das Testergebnis nach **15 Minuten** ab.  
Lesen Sie das Ergebnis nicht nach 20 Minuten.


### Ergebnisauswertung:



Positiv



Negativ

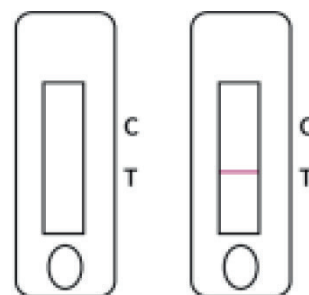

Ungültig

Für ein validiertes Ergebnis muss die Kontrolllinie „C“ erscheinen. Das Ergebnis ist positiv, sobald sich die Nachweislinie „T“ färbt. Ein negatives Ergebnis liegt vor, sofern keine Färbung für die Nachweislinie „T“ erscheint.